




GB: INSTRUCTIONS FOR USE

Date of issue of the instructions for use: 01.01.2013

BENU quick pregnancy test for self-testing
Please read the instructions for use carefully before using the test!

PERFORMING THE TEST

- 1. Open the pouch shortly before testing and remove the test device.
- 2. Pull out the cap and place the absorbent tip in urine for at least 10 seconds.

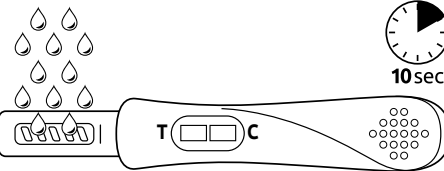

Possible error: Passing the test tip with urine (e. g. in a cup) may cause malfunction of the test.

- 3. Re-cap the device and wait for 3 minutes.

READING THE RESULT

Read the result after 3 minutes. If no line appears within 3 minutes, wait 1 more minute. Do not read results after 5 minutes. A positive result may be observed in as soon as 1 minute. The colour intensity of the test bands may vary since different stages of pregnancy have different concentrations of HCG hormone.

One band:
You may assume to be **"not pregnant"**.

Two bands:
You may assume to be **"pregnant"**.

No band:
Test result **"invalid"**.

FOLLOW-UP ACTION

- If the result is **"not pregnant"** and your period late, repeat the test one day later. If the test is still negative, consult your gynaecologist.
- If the result is **"pregnant"**, please consult your gynaecologist to confirm your pregnancy (avoid potential risks to harm the embryo such as e. g. x-ray).
- If the result is **"invalid"**, the absorbent tip probably was not thoroughly wet. Please repeat the testing with a new test.

If you repeat the test several times and results are contradictory, please consult your gynaecologist.

QUESTIONS & ANSWERS

- 1. **How does the BENU QUICK pregnancy test work?** Human Chorionic Gonadotropin (hCG) is a hormone, produced by the developing placenta shortly after the conception and secreted into the urine. It increases up to the 3rd month of pregnancy. The BENU QUICK pregnancy test detects this hormone in urine rapidly.
- 2. **When to do the test?** Any time of day from missed period.
- 3. **Can alcohol alter the test result?** No, alcohol will usually not have any effect on the test result.
- 4. **Can medication alter the test result?** hCG, FSH, LH and TSH based medication may have an effect on the test result, other hormone-based contraceptives like the birth control pill may not.

LIMITATIONS

- Test result must be read in 5 minutes. A negative result, which may change to positive after 5 minutes, is not an accurate reading.
- Due to the high sensitivity of the test, even very low hCG values can be verified in the early stages of pregnancy. During this early stage, the number of spontaneous abortions is about 31 %, approx. 22 % remain clinically undetected.
- Beside pregnancy, some illnesses and spontaneous abortions may lead to increased levels of hCG in urine, which may be detected by the test.
- Menopausal urine may similarly cause false positives.
- Low concentration of hCG in a very early stage of pregnancy can give a negative result. In this case, another specimen should be obtained at least 48 hours later and tested.
- Sterility treatments, based on hCG, may cause false results. Please consult your gynaecologist.

PRECAUTIONS

- Keep out of the reach of children, do not swallow!
- Do not disassemble the test device!
- Discard the test immediately after use!
- Do not use the test if the pouch is damaged or beyond expiry date!

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE:	BN-513
PACKAGE CONTENT:	1 test, 1 instructions for use.
PRODUCT CODE:	BN-520
PACKAGE CONTENT:	2 tests, 1 instructions for use.
STORAGE:	At room temperature (4°C to 30°C) away from direct sunlight, moisture and heat.
CHARACTERISTICS:	Sensitivity from 25 IU/L. Accuracy over 99%.
ACTIVE INGREDIENTS:	Monoclonal antibodies against hCG.

MEANING OF SYMBOLS

- Follow the instructions for use
- Tests per package
- Store between 4°C and 30°C
- Manufacturer
- In vitro use. Not to be swallowed!
- Expiry date
- Single use only
- Batch code


DE: GEBRAUCHSANWEISUNG

Stand der Gebrauchsanweisung: 01.01.2013

BENU Schwangerschafts-Schnelltest zur Eigenanwendung
Vor Anwendung des Tests bitte erst alle Hinweise sowie die **"FRAGEN UND ANTWORTEN"** sorgfältig durchlesen.

ANWENDUNG

- 1. Folienbeutel erst kurz vor der Anwendung öffnen und Teststab entnehmen.
- 2. Schutzkappe abziehen und Testspitze für mindestens 10 Sekunden in den Urin halten.

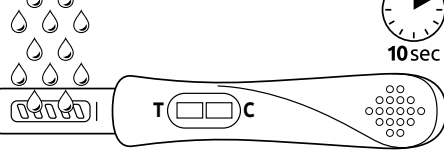

Fehlerquellen: Das tiefere Eintauchen des Teststabes über die Testspitze (z. B. im Becher) kann Fehlfunktionen des Tests verursachen.

- 3. Schutzkappe aus hygienischen Gründen wieder auf den Teststab aufsetzen und 3 Minuten warten.

ERGEBNIS ABLESEN

Lesen Sie das Ergebnis nach 3 Minuten ab. Falls nach 3 Minuten keine Linie erscheint, warten Sie noch 1 Minute länger. Nach 5 Minuten kann das Testergebnis nicht mehr sicher ausgewertet werden. Je nach hCG-Konzentration kann ein positives Ergebnis schon nach 1 Minute erscheinen. Bei dem Ergebnis "schwanger" können die 2 Linien von unterschiedlicher Stärke und Farbtintensität sein. Bedingt durch niedrige hCG-Werte gerade zu Beginn einer Schwangerschaft kann die Linie im Testfenster nur sehr leicht gefärbt oder auch nur sehr dünn sein.

Eine Linie:
Sie können davon ausgehen, **"NICHT SCHWANGER"** zu sein.

Zwei Linien:
Sie können davon ausgehen, **"SCHWANGER"** zu sein.

Keine Linie:
Testergebnis **"UNGÜLTIG"**.

FOLGEMAßNAHMEN

- Testergebnis **"NICHT SCHWANGER"**: Ist das Testergebnis **"NICHT SCHWANGER"** und die Periode überfällig, führen Sie bitte am nächsten Tag einen neuen Test durch und wenden Sie sich an Ihren Frauenarzt.
- Testergebnis **"SCHWANGER"**: Bitte wenden Sie sich gleich an Ihren Frauenarzt, er wird Sie für den weiteren Verlauf der Schwangerschaft beraten (vermeiden Sie potentielle Risiken für den Embryo wie z. B. Röntgen).
- Testergebnis **"UNGÜLTIG"**: Bei einem ungültigen Testergebnis wurde sehr wahrscheinlich nicht genügend Urin aufgenommen. Bitte wiederholen Sie die Anwendung mit einem neuen Test.

Haben Sie mehrere Tests durchgeführt und verschiedene Ergebnisse erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Frauenarzt.

FRAGEN UND ANTWORTEN

- 1. **Wie funktioniert der BENU Schwangerschafts-Schnelltest?** Kurz nach der Befruchtung bildet die Plazenta das Schwangerschaftshormon hCG und gibt es kontinuierlich in den Urin ab. Dieses Hormon steigt bis zum 3. Schwangerschaftsmonat an. Der BENU Schwangerschafts-Schnelltest erkennt dieses Hormon und weist dieses schnell im Urin nach.
- 2. **Ab wann kann der Test angewendet werden?** Zu jeder Tageszeit ab der fälligen Periode.
- 3. **Kann Alkohol das Testergebnis beeinflussen?** Nein, wenn der Konsum nicht übermäßig ist.
- 4. **Können Medikamente das Testergebnis beeinflussen?** hCG, FSH, LH und TSH beinhaltende Medikamente ja, die Antibabypille nicht.

GRENZEN

- Ein leicht positives Ergebnis, das erst nach 5 Minuten erscheint, ist nicht mehr sicher auszuwerten.
- Durch die hohe Empfindlichkeit des Tests werden schon sehr niedrige hCG-Werte in den ersten Tagen der Schwangerschaft nachgewiesen. Gerade in frühen Anfangsstadien werden 31% aller Schwangerschaften natürlich abgebrochen (spontaner Abort), 22% bleiben klinisch unerkannt.
- Außer Schwangerschaften können auch andere Gründe wie z. B. Krankheiten oder spontane Aborte nachweisbare hCG-Werte im Urin bewirken.
- Urin in den Wechseljahren kann ebenfalls falsch positive Ergebnisse verursachen.
- Niedrige hCG-Konzentrationen in sehr frühen Stadien einer Schwangerschaft können negative Ergebnisse anzeigen. In diesem Fall sollte der Test frühestens nach 48 Stunden wiederholt werden.
- Auf hCG basierende Medikamente und Sterilitätsbehandlungen können zu falschen Ergebnissen führen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt.

WARNHINWEISE

- Von Kindern fernhalten, nicht einnehmen!
- Teststab nicht auseinander nehmen!
- Gebrauchten Test umgehend nach der Anwendung entsorgen!
- Test nicht anwenden, wenn die Folie beschädigt oder das aufgedruckte Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist!

PRODUKTINFORMATIONEN

PRODUKTCODE:	BN-513
PACKUNGSBESTANDTEILE:	1 Test, 1 Gebrauchsanweisung
PRODUKTCODE:	BN-520
PACKUNGSBESTANDTEILE:	2 Tests, 1 Gebrauchsanweisung
AUFBEWAHRUNG:	Vor Sonnenlicht geschützt, trocken und bei Raumtemperatur (4°C bis 30°C).
LEISTUNGSMERKMALE:	Sensitivität: ab 25 IE/L. Gesamtgenauigkeit: über 99%.
WIRKSAME BESTANDTEILE:	Monoklonale Antikörper gegen hCG.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

- Gebrauchsanweisung beachten
- Tests pro Packung
- Bei 4°C bis 30°C aufbewahren
- Hersteller
- In-Vitro-Anwendung. Nicht einnehmen!
- Verwendbar bis
- Nicht zur Wiederverwendung
- Chargenbezeichnung


FR: MODE D'EMPLOI

Révision du mode d'emploi : 01.01.2013

BENU Test de grossesse rapide destiné à des autodiagnostic
Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement la notice d'emballage et les questions-réponses.

UTILISATION

- 1. Ouvrir le sachet juste avant l'utilisation et en retirer le test de grossesse.
- 2. Retirez le capuchon de protection et placer la tige absorbante vers le bas, dans l'écoulement d'urine pendant au minimum 10 secondes.

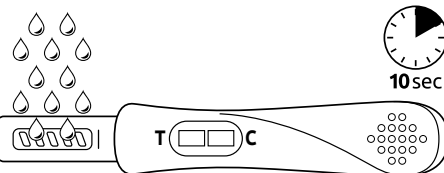

Erreur possible: Un contact de l'urine au-delà de la zone absorbante (par exemple en cas de test dans un récipient) peut provoquer un test erroné.

- 3. Pour des raisons d'hygiène, replacer le capuchon de protection sur la tige absorbante du test et attendre 3 minutes.

RÉSULTATS

Lire le résultat après 3 minutes. Si au bout de 3 minutes, aucune ligne n'apparaît, attendre 1 minute de plus. Après 5 minutes, le résultat du test ne peut être évalué de façon fiable. En fonction de la concentration d'hCG, un résultat positif apparaît après 1 minute. En conséquence, le résultat "Enceinte" peut être de 2 lignes d'épaisseurs et de couleurs variables. Lors de faibles taux d'hCG, en particulier au début de la grossesse, la ligne dans la fenêtre de test peut être très légère, de couleur pâle ou même très mince.

Une ligne:
Il n'y a pas de grossesse détectée. Votre résultat est **"PAS ENCEINTE"**.

Deux lignes:
Une grossesse a été détectée. Votre résultat est **"ENCEINTE"**.

Aucune ligne:
Votre résultat est **"INVALIDE"**.

SUIVI

- Résultat du test: **"PAS ENCEINTE"**: Lorsque le résultat du test est **"PAS ENCEINTE"** mais que les règles sont en retard, effectuez un nouveau test le lendemain et consultez votre médecin.
- Résultat du test: **"ENCEINTE"**: Veuillez consulter votre médecin. Il saura vous conseiller et vous expliquer les démarches à suivre.
- Résultat du test: **"INVALIDE"**: Un résultat "Invalide" vient probablement du fait que le test n'ait pas été suffisamment imbibé d'urine. Veuillez refaire un nouveau test. Si vous avez réalisés plusieurs tests et que vous obtenez des résultats différents, veuillez consulter votre médecin.

QUESTION ET REPONSES

- 1. **Comment fonctionne le test de grossesse précoce BENU?** Peu de temps après la fécondation, le placenta constitue l'hormone de grossesse hCG qui se retrouve dans l'urine. La concentration de cette hormone augmente jusqu'à 3 mois de grossesse. Le test de grossesse rapide BENU détecte cette hormone qui est présente dès le début de la grossesse.
- 2. **A partir de quand le test de grossesse précoce BENU peut-il être utilisé?** A n'importe quel moment de la journée, dès le retard des règles.
- 3. **L'alcool peut-il affecter le résultat du test?** Non, tant que la quantité absorbée n'est pas excessive.
- 4. **La prise de médicaments peut-elle influencer le résultat?** Les médicaments contenant des hCG, FSH, LH ou TSH peuvent avoir une influence sur le résultat du test, la pilule contraceptive non. En cas de doute, consultez votre médecin.

LIMITATION D'EMPLOI

- Un résultat positif qui apparaît après plus de 5 minutes ne doit pas être considéré comme valable.
- En raison de la grande sensibilité du test, de très faibles niveaux d'hCG sont détectés dans les premiers jours de la grossesse. Surtout dans les premiers stades, 31% de toutes les grossesses sont interrompues (avortement spontané), 22% restent cliniquement inaperçues.
- La présence d'hCG dans l'urine peut également être dûs à certaines maladies ou à un avortement spontané.
- Durant la ménopause, la composition de l'urine peut également entraîner des résultats faussement positifs.
- Les faibles niveaux d'hCG dans les stades très précoces de la grossesse peuvent donner des résultats négatifs. Dans ce cas, le test doit être répété au moins dans les 48 heures.
- Les médicaments pour le traitement de fertilités à base d'hCG peuvent donner des résultats erronés. Veuillez demander conseil à votre médecin.

MISE EN GARDE

- Tenir hors de portée des enfants, ne pas ingérer!
- Ne pas tenter de démonter le test!
- Eliminer immédiatement le test après usage.
- Ne pas utiliser le test si l'emballage est endommagé ou la date de péremption est dépassée.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE ARTICLE:	BN-513
CONTENU:	1 test, 1 mode d'emploi.
CODE ARTICLE:	BN-520
CONTENU:	2 tests, 1 mode d'emploi.
CONSERVATION:	Conserver à l'abri de la lumière et à température ambiante (4°C à 30°C).
CARACTÉRISTIQUES:	Sensibilité: dès 25 IE/L. Fiabilité : plus de 99%.
COMPOSITION:	Anticorps monoclonaux contre hCG.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

- Consulter le mode d'emploi
- Tests par emballage
- Conserver entre 4°C et 30°C
- Fabricant
- En application In-Vitro. Ne pas ingérer !
- Date d'expiration
- Ne pas réutiliser
- Numéro de lot

Datum van afgifte van de instructies voor gebruik: 01.01.2013

Datum vydání návodu k použití: 01.01.2013

A használati útmutató kiadásának dátuma: 2013.01.01

LOT Gyártási szám